

Lámpara Portátil de Emergencia Para Quirófano

Marca IMEBIO Modelo LE-2


Este equipo puede ser utilizado de forma rutinaria o emergencia en caso de falla de suministro de la corriente eléctrica alterna, gracias a su sistema de emergencia el cual provee al equipo de la energía necesaria para trabajar durante un tiempo de 2 horas sin pérdida de intensidad y con luz fría con un filtro reductor de calor en un 90% y corrector del haz de luz, proporcionando un incremento de calor de 10° a 15° C en la zona de operación para evitar el desecado de tejidos y de 2° C en la cabeza del cirujano, siendo especialmente diseñada para proporcionar una luz libre de sombras a la interposición de cuerpos.

El tiempo máximo de recarga es de 10 horas con sistema de protección para evitar la sobrecarga de la batería si el equipo está conectado en forma permanente. El equipo tiene un sistema de cambio automático y de forma instantánea de alimentación de corriente alterna a batería.

El equipo cuenta con una base con ruedas antiestáticas que permite desplazar al equipo de manera fácil y segura.



Temperatura de Color en Grados Kelvin.	de 3500° a 5000°
Intensidad homogénea de iluminación a 1 metro de la fuente.	75,000 Luxes.
Foco Halógeno. Con un tiempo de reemplazo aproximado cada 300 Horas.	24 V 25 W
Consumo total en Watts.	100 W
Suministro de corriente eléctrica alterna con clavija polarizada.	120 V 60 Hz C.A. \pm 10%
Diámetro del campo de luz.	Ajustable de 15 a 25 cm.
<u>Accesorios</u>	
Mangos desmontables y autoclavables.	1 pieza.
<u>Consumibles</u>	
Foco halógeno de reserva.	1 pieza.

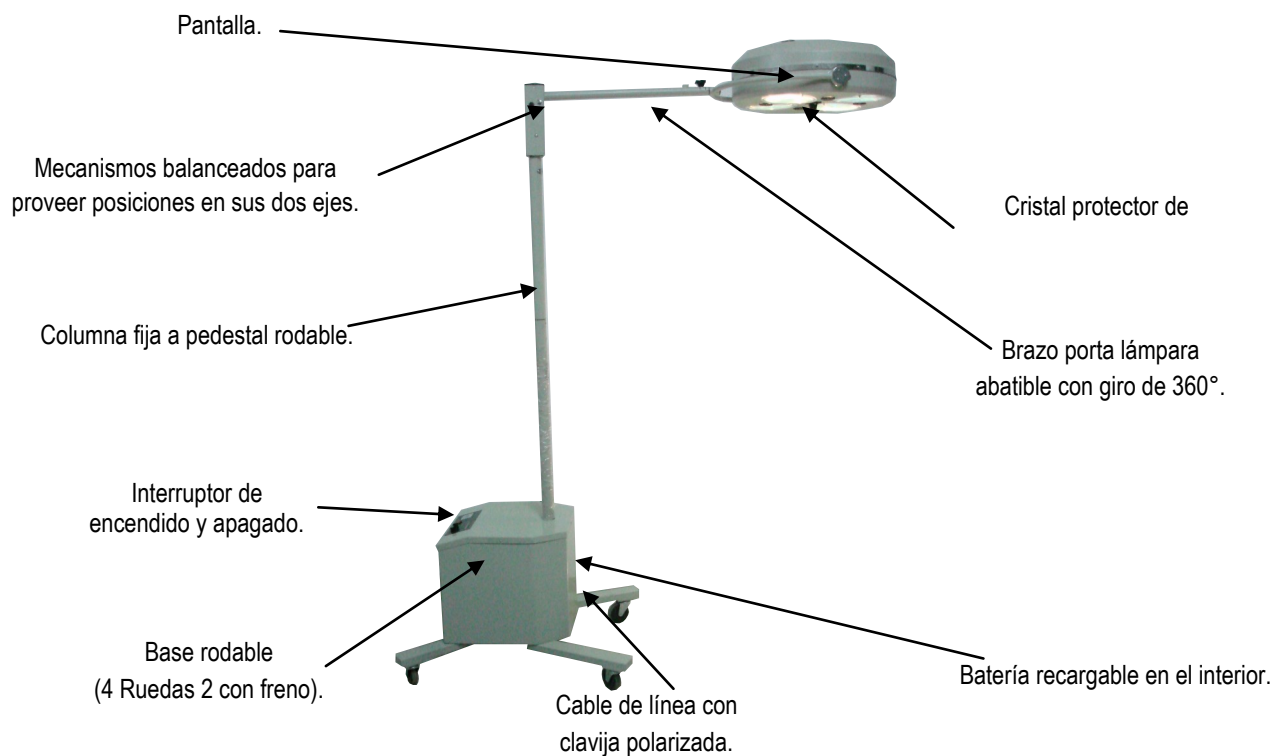

El equipo puede fabricarse con características especiales opcionales como son:

- Puede ser provisto de panel digital en la pantalla o en la articulación con posibilidad de controlar la intensidad de luz, encendido y apagado.
- Regulador electrónico de salida regulada.
- Indicador visual del nivel de carga.
- Las especificaciones, cantidad de consumibles, accesorios y refacciones pueden variar dependiendo las diferentes necesidades del área usuaria.